

LOJER®

Человеческое тело – сложный природный механизм, сочетающий комплексные функциональные качества и личные особенности организма. Именно поэтому поддержание его в оптимальном состоянии требует использования экспертного оборудования.

Стол для мануальной терапии

*manuthera*²⁴²

НОВАЯ ЭРА

СТОЛОВ ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ



Большая эффективность
в постановке диагноза

Характеристики, позволяющие использовать
современные методы лечения

Улучшенная эргономика

Комфорт и безопасность
пациента высшего уровня

Созданный экспертами – самый функциональный стол в мире

Стол Manuthera 242 разработан финскими экспертами, благодаря использованию современных уникальных технологий проведение мобилизации, манипуляции и диагностики стало гораздо проще для врача и комфортнее для пациента.

Стол Manuthera 242 – это рабочий инструмент для специалистов различных областей – мануальных терапевтов, спортивных врачей, массажистов, напрататов, остеопатов, физиотерапевтов и специалистов кайропрактики. Стол Manuthera 242 поднимает работу терапевта на новый уровень, позволяя проводить диагностику и сложные повторяющиеся манипуляции без каких-либо усилий благодаря патентованной системе синхронизированных моторов и структуре стола в целом.

Мобилизация пациента в ключевые анатомические корректные положения производится плавно и тихо. Лечение и диагностика проводится благодаря 3D позиционированию (тракция, флексия, латеральная флексия, ротация), есть возможность использования гравитационной терапии. Дизайн стола, система приводов, использование подшипников во всех движущихся частях делает процедуры гораздо более комфортными и для врача и для пациента.

Передовые характеристики для пациентов

Головная секция с двойной артикуляцией с функцией 3D движения для безопасной мобилизации грудного отдела и шеи при вертикальном и латеральном перемещении.

Опоры для рук с бесступенчатой регулировкой высоты и отведения в стороны. Опоры для рук могут быть отведены в стороны и использованы как боковые опоры.

Надежные, легкие в эксплуатации и эргономичные **рукоятки** для блокировки движения в нужном положении.

Специальные защитные накладки на опорных ножках – для безопасности электроприводы блокируются при контакте с ними частей тела врача или пациента.

Регулируемые ножки с дополнительной поддержкой.

Широкий диапазон регулировки высоты.

НОВИНКА! Двусоставная грудная секция для вертикального сгибания и 3D ротации. Уникальный инструмент для мобилизации и манипуляции грудного отдела!




Превосходные возможности лечения

Благодаря надежной структуре стола, анатомически выверенному дизайну и обивке, пациент чувствует себя комфортно при любых видах процедур.

Движения стола идентичны движениям позвоночника пациента, врачу нет необходимости поднимать пациента, перемещать его в сторону за счет собственных усилий. Мягкость и плавность всех движений позволяет достичь безболезненности процедуры и полного расслабления пациента. В результате врач имеет возможность провести большое количество повторяющихся движений и достичь максимального эффекта, не причиняя боли пациенту.

Благодаря электроприводу наклона ложа, даже пациенты с самыми серьезными проблемами со спиной могут легко расположиться на столе в начале процедуры. Примененные технологии позволяют объединить несколько видов манипуляций и избежать необходимости поднимать пациента со стола в течении процедуры для изменения положения.

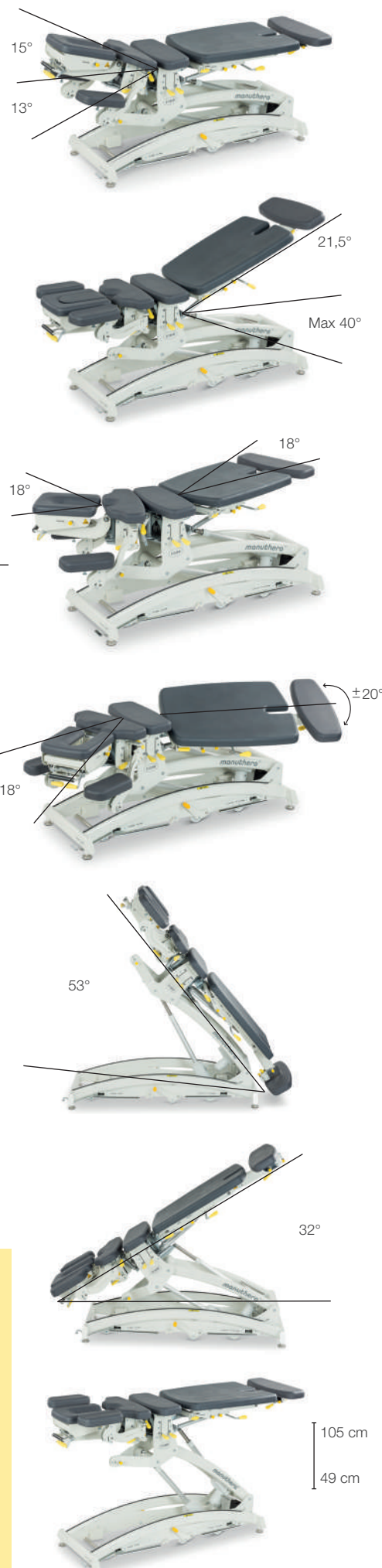

Секция нижней части тела пациента с экстензией /флексией, латеральными движениями и 3D ротацией. НОВИНКА: ротация нижней части тела пациента.

Подставка для ног многопозиционная: установка вверх, в положение лежа, в положение для доступа к столу.

Легко обрабатываемая, устойчивая и биосовместимая обивка стола – **литые матрасы.**

НОВИНКА: функция «drop» Новая технология совмещения «drop» функции с тракцией для легкой манипуляции в области бедра.

Задние и передние стопоры для придания дополнительного упора стола в стационарном положении – для надежности при использовании любой из секций.

Синхронизированные моторы стола Manuthera 242

Стол Manuthera 242 это первый в мире стол с двумя синхронизированными моторами, которые значительно упрощают работу мануального терапевта, делая все движения стола плавными. Благодаря синхронизации моторов достигается максимальная безопасность – движения стола автоматически останавливаются, если в структуре стола появляется препятствие (части тела врача или пациента) и стол поднимается вверх.

НОВИНКА! Электропривод Наклона **ВВЕРХ/ВНИЗ** для гравитационной терапии, также дает наиболее комфортный доступ пациента к столу в начале процедуры. Декомпрессия еще никогда не была такой легко переносимой для пациента!

Фиксируемые ролики.




Стол Manuthera 242 – для продвинутых профессионалов

Стол Manuthera 242 создан для поддержки работы врачей мануальной терапии:

- Легендарный финский дизайн – непревзойденная эргономика.
- Передовые возможности мультитракции и 3D манипуляции
- Оптимизированная работа электроприводов для облегчения работы
- Несколько опций движения каждого сегмента стола
- Высокая функциональность для использования различных методов лечения
- Специальные подшипники придают плавность всем движениям и надежность при большом потоке пациентов
- Легко обрабатываемая и долговечная обивка
- Высокая мобильность стола
- Безболезненные процедуры для пациентов
- Высокая стоимость при перепродаже
- Гарантия производителя - 2 года


	Новинка	
	Manuthera 242	Manuthera 241
Грудная секция	2	1
Регулировка высоты (Hi-Lo)	49–105см	53–89см
Вес	170кг	128кг
Функция наклона ВНИЗ (Головная секция вниз)	Электрическая	Механическая
Функция наклона ВВЕРХ (Головная секция вверх)	Электрическая	Механическая
Ротация секции нижней части тела пациента	x	-
Передние стопоры	x	-
Задние стопоры	x	-
Фиксируемые ролики	2	4
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	150кг	160кг
Мотор (только для подъёма*)	2	1
Функция «drop»	Обычный «drop» и «drop» с функцией тракции	«Drop» с функцией тракции
Автоматическая anti-squeeze функция**	x	-
Специальные защитные накладки на опорных ножках (движения немедленно останавливаются)	x	-
Регулируемые ножки с дополнительной поддержкой	x	-
Блокировка электрических функций в режиме ожидания	Автоматически (в течение 2 часов) или немедленно нажимая трижды на педаль (Hi-Lo)	Ручное
Материал ложа	Литые секции из пенополиуретана	Поролон и кожзаменитель
Головная секция формы U	x	-
Заглушка выреза для лица головной секции	x	-
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия

Manuthera 242
Максимальная ширина
54 см

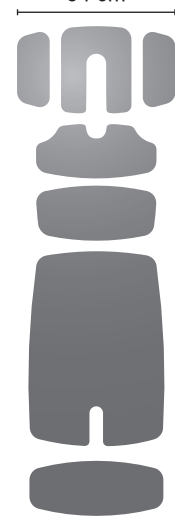

Максимальная длина 190 см

Manuthera 241
Максимальная ширина
57 см

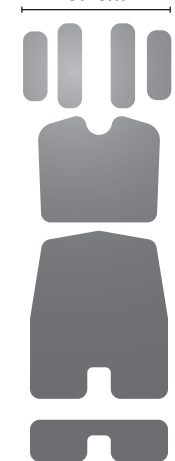

Максимальная длина 180 см

*Мотор только поднимает, стол понижается при помощи гравитации

**Стол автоматически останавливается, если в структуре стола появляется препятствие и стол поднимается вверх.