




# DEFIGARD 4000

Энергия, спасающая жизни

С DEFIGARD 4000 дефибрилляция становится простой, как алфавит



MULTIPULSE  
BIO WAVE

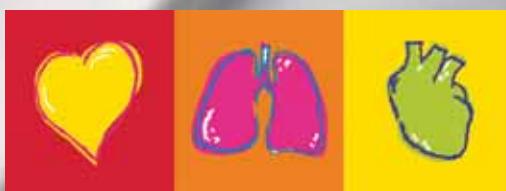

**SCHILLER**

Искусство Спасения Жизни

# DEFIGARD 4000

Простое и интуитивное управление –  
одна клавиша обеспечивает доступ  
ко всем основным функциям:

- Выбор: уровня энергии в ручном режиме, установок пейсмекера, АНД
- В дефибрилляторе DEFIGARD 4000 используется технология **Multipulse Biowave®** с возможностью выбора уровня энергии до 200 Дж
- Возможность установки следующих уровней энергии: 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 и 200 Дж
- На ярком четком экране диагональю 5,9'' визуализируются кривые и значения ЭКГ, ЧСС, плеизомографии и SpO<sub>2</sub>

И все это в компактном и легком приборе!

Удобство в эксплуатации в сочетании с привлекательным дизайном, компактным размером и непревзойденным соотношением качества и цены делают DEFIGARD 4000 идеальным прибором для использования в любых экстренных ситуациях!



Использование в машинах скорой помощи,  
а также на самолете:

Благодаря сертифицированной системе крепления, DEFIGARD 4000 может быть использован в автомобилях скорой помощи и на самолетах.

Установка оснащена универсальным источником питания, что позволяет прибору заряжаться от бортовой сети.

Устройство также может быть легко демонтировано.



DEFIGARD 4000 с утюжковыми электродами и карманами

# DEFIGARD 4000



DEFIGARD 4000 – идеальный дефибриллятор и не только:

Снабжен адгезивными и утюжковыми электродами

- **Ручная дефибрилляция**
- **Полуавтоматическая дефибрилляции (опция)**  
Система голосовых и текстовых сообщений, помогающих в процессе дефибрилляции.  
Энергия дефибрилляции регулируется автоматически, при подключении детских электродов
- **Пейсмекер (опция)**  
Режимы:  
**Fix** (с постоянным ритмом),  
**Demand** (по запросу),  
**Overdrive** (сверхнагрузка, частота x3)
- **Мониторинг**  
Представление на экране от 1 до 6 каналов кривой ЭКГ и плецизограммы или две кривые ЭКГ
- **SpO<sub>2</sub>: Masimo или Nellcor (опция)**  
Измерение начинается при обнаружении датчика
- **3-канальный термопринтер (опция)**
- **Память**  
Внутренняя память для сохранения 13 часов данных ЭКГ или 500 событий, или 80 минут данных ЭКГ с аудиокомментариями и 500 событий в режиме АНД
- **USB интерфейс** для передачи данных из внутренней памяти и обновлений программного обеспечения

