

# HyLED 9500M

## Передвижной Хирургический Светильник

Материалы и информация, содержащиеся в этой брошюре, распространяются в различных государствах, но не все указанные здесь изделия или услуги обязательно доступны в вашей стране или регионе. За справками о наличии соответствующих изделий или услуг обращайтесь в местные офисы или к представителям компании.

### Бразилия

Адрес: Rua Joaquim Floriano, 488, floor Intermediário - cj 02, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, Brazil  
Тел.: (55-11) 3078-8026

### Канада

Адрес: 4250 Kingsway, Suite 206, Burnaby, BC, Canada V5H 4T7  
Тел.: (1-604) 451-1199

### Египет

Адрес: 24th floor, 34 EL-Obour Buildings, Salah Salem Street, Helipolis, Cairo, Egypt  
Тел.: (20-2) 2260-9728

### Франция

Адрес: Eurorarc Créteil Cedex 123, Chemin des Bassins 94000 Créteil France  
Тел.: (33-1) 4513-9145

### Германия

Адрес: Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim  
Тел.: (49-6251) 17524-0

### Индия

Адрес: Unit No. 401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place Wazirpur District Centre, New Delhi 110 034 India  
Тел.: (91-11) 4923-0000

### Индонезия

Адрес: Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Тел.: (62-21) 576-2650

### Италия

Адрес: Via Girardo Patecchio, 4 - 20141 Milano, Italy  
Тел.: (39-02) 57402-4444

### Мексика

Адрес: Insurgentes Sur # 1787 Piso 2, Col. Guadalupe Inn, Mexico D.F. 01020  
Тел.: (52-55) 5661-9450

### Нидерланды

Адрес: Saturnusstraat 17, 2132NB Hoofddorp, The Netherlands  
Тел.: (31-23) 574-9656

### Россия

Адрес: 123022, Москва, 2-ая Звенигородская ул., 13, стр. 41

### Испания

Адрес: Avenida Manoteras 38, Bloque B, Bajo B008, Madrid 28050, Spain  
Тел.: (34-91)392-3754

### Турция


Адрес: General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:31 A Blok K.13 D.52 Merter/Istanbul, Turkey  
Тел.: (90-212) 482-0877

### Великобритания

Адрес: 3 Percy Road, St. John's Park, Huntingdon, Cambs, Pe29 6SZ, United Kingdom  
Тел.: (44-1480) 416-840

### США

Адрес: 800 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430-0619, USA  
Тел.: (1-800) 288 2121, (1-201) 995-8000

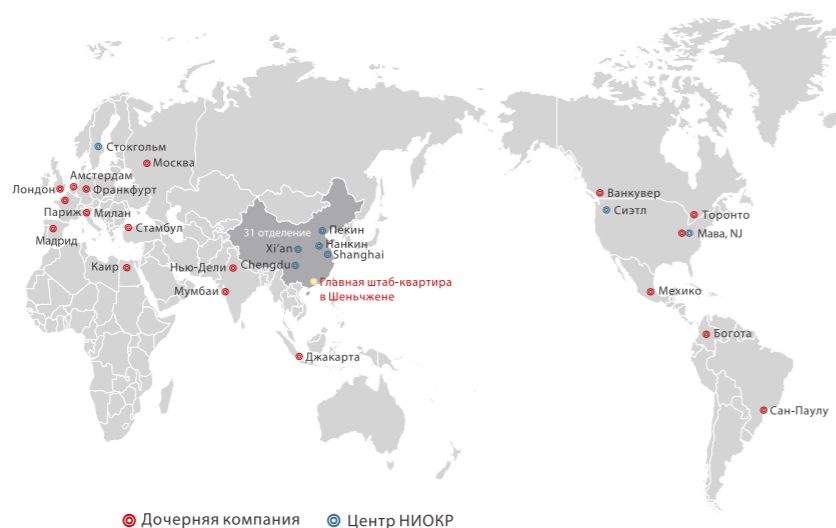

# HyLED 9500M

## Передвижной Хирургический Светильник

DISTRIBUTOR:



EN ISO 13485  
EN ISO 9001



Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China  
Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680



Mindray is the registered trademark owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.  
HyLED is the trademark owned by Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.  
© 2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights Reserved.  
P/N: RUS-HyLED 9500M-21028544P-20121108

# HyLED 9500M

## Передвижной Хирургический Светильник

HyLED 9500M обладает длительным сроком службы, превосходной светодиодной технологией, выдающейся гибкостью и маневренностью, что позволяет использовать ее в экстренных операциях, малой хирургии, палатах реанимации и интенсивной терапии, а также в стандартных операционных блоках.



- **Длительный срок службы:**

Срок службы излучающих элементов (светодиодов) в светильнике HyLED 9500M 40000 часов, что в 40 раз больше, чем в галогенных светильниках.

- **Холодный свет:**

Благодаря светодиодной технологии, светильник медицинский напольный передвижной HyLED 9500M не имеет спектра инфракрасного излучения, что позволяет избежать повреждения тканей от нагревания.

- **Отсутствие тени в операционном зале:**

Уникальный треугольный дизайн купола лампы и 60 светодиодных элементов позволяют обеспечить действительно бестеневое освещение и отличную совместимость с ламинарным потоком.

- **Максимальная гибкость:**

Благодаря мобильной базе и питанию от аккумуляторных батарей светильник операционный HyLED 9500M можно использовать, там, где это необходимо, а надежная система крепления и позиционирования обеспечит максимальную гибкость, маневренность и удобство эксплуатации.



Высококачественные светодиодные лампы создают однородный световой луч.



Действительно тонкий боковой профиль купола светильника.



Компактный крестообразный дизайн не создает препятствий ламинарному потоку.



Простая конструкция ручки купола светильника обеспечивает превосходную маневренность.



Ультратонкое мобильное основание в сочетании с надежным блоком резервного питания обеспечивают максимальную маневренность лампы. Аккумуляторная батарея позволяет работать в автономном режиме в течение не менее 3 часов.



Четыре колеса с системой блокировки обеспечивают стабильность светильника.

### Технические характеристики:

	HyLED 9500M
Освещенность (на расстоянии 1м)	120,000 Лк
Диаметр светового поля	195-330mm
Глубина освещенности	1,200mm
Цветовая температура	4,350K
Индекс цветопередачи	95
Ослабление тени трубкой	100%
Ослабление тени одной маской	65%
Ослабление тени трубкой и одной маской	60%
Ослабление тени трубкой и двумя масками	50%
Излучаемая энергия	3.6 мW/м * люкс
Срок жизни источников света LED, час	≥40,000
Потребляемая мощность	90Вт
Источник питания	100 VAC ~ 240VAC, 50/60 герц
Срок работы аккумулятора	1, 5 Час (полная мощность) 3 Часа (нормальное состояние)

