



SCHILLER
SWITZERLAND

ИСКУССТВО СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ




**АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ**



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ
СТРЕСС-СИСТЕМЫ
СТРЕСС-СИСТЕМЫ С ГАЗОАНАЛИЗОМ
КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ
МОНИТОРИНГ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ
МОНИТОРИНГ АД ПО ХОЛТЕРУ
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
СПИРОМЕТРЫ
МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

FRED® easy (First Responder External Defibrillator)

Новая концепция автоматических наружных дефибрилляторов

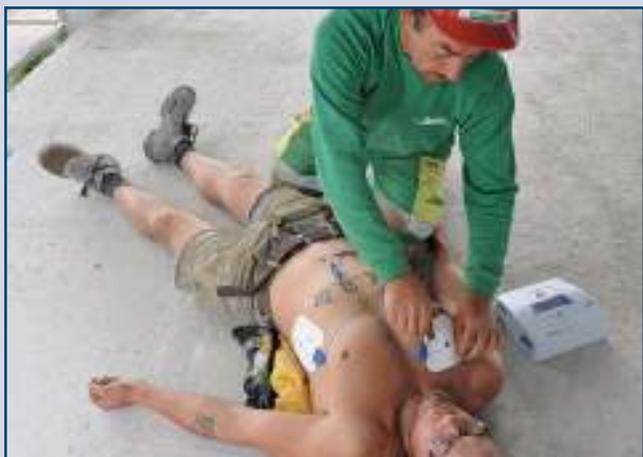

**FRED® easy –
идеальный прибор для использования
как врачами, так и парамедиками!**

- Простое управление
- Легкий
- Голосовые подсказки
- ЖК-дисплей (текстовые инструкции, кривая ЭКГ, время работы, количество разрядов, емкость батареи и памяти, тип используемых электродов)
- Сохранение ЭКГ и событий
- Автоматическое переключение в детский режим при подсоединении педиатрических электродов

**FRED® easy Trainer:
для обучения работе с АНД.**

- Управление аналогично настоящим приборам
- Запрограммированные сценарии
- Пульт дистанционного управления позволяет преподавателю выбирать и контролировать сценарий
- Электроды для обучения, подходящие для любого манекена.

**При остановке сердца счет идет на секунды:
каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание.
В большинстве случаев смерть наступает в течение 10 минут.**

Автоматические дефибрилляторы SCHILLER делают процесс проведения реанимационных мероприятий простым, быстрым и эффективным.

Доступные версии FRED® easy:

Полностью автоматический режим:

наложите электроды на пациента и включите прибор. Дефибриллятор самостоятельно проведет анализ ЭКГ и в случае необходимости подаст разряд.

Полуавтоматический режим:

наложите электроды на пациента, включите прибор и следуйте инструкциям; дефибриллятор самостоятельно проведет анализ ЭКГ и в случае необходимости даст рекомендацию провести дефибрилляцию - нажмите на клавишу подачи разряда.

Ручной режим:

врач может самостоятельно принять решение о необходимости подачи разряда, не дожидаясь анализа ЭКГ от дефибриллятора.

FRED® easy Online:

дефибриллятор передает в информационную сеть данные о состоянии прибора и информацию с карты памяти. Центральная станция может соединять несколько десятков приборов, постоянно подключенных к сети.



Прорыв в области кардиодефибрилляции – энергия, спасающая жизни!

Во всех дефибрилляторах SCHILLER используется импульс Multipulse Biowave®.

Меньшее повреждение миокарда благодаря уникальным характеристикам дефибрилляционных волн увеличивает шансы на выживание.

Multipulse Biowave® – бифазный многочастотный дефибрилляционный импульс с фиксированной длительностью фаз, при этом модуляция импульс-пауза зависит от сопротивления грудной клетки пациента.



FRED® easyport

Первый в мире карманный дефибриллятор.



FRED® easyport – дефибриллятор, который может поместиться в кармане или чемоданчике врача; отвечает всем требованиям к современному Автоматическому Наружному Дефибриллятору.

- Легкий – 450 г (включая батарею)
- Компактный – размеры: 133 x 126 x 35 мм
- ЖК-дисплей высокого разрешения
- Удобная сумка для ношения на поясе

Пациенты группы риска могут иметь свой собственный прибор после того, как они и члены их семей пройдут соответствующий инструктаж.