

VeneHeart D3

Дефибриллятор/монитор



mindray
healthcare within reach

Конструкция «четыре-в-одном» для клинических нужд



BeneHeart D3 — это одно компактное легкое устройство, совмещающее функции ручной дефибрилляции, мониторинга, кардиостимуляции и АНД. Быстрая зарядка и подача разряда с настраиваемым уровнем энергии обеспечивает эффективную реанимацию. Мониторинг основных показателей жизнедеятельности, таких как ЭКГ, SpO_2 и дыхание, позволяет улучшить диагностику и быстро определить эффективность дефибрилляции.

Степень защиты от попадания твердых частиц и жидкости IP44 обеспечивает надежную работу дефибрилляторов D3 в самых разных клинических условиях.

Эффективное выполнение различных задач



Мониторинг

Диагностика и мониторинг, включая ЭКГ в 3/5 отведениях и SpO_2 с технологиями Mindray/Masimo/Nellcor.



Ручная дефибрилляция

Режим асинхронной дефибрилляции для кардиоверсии при фибрилляции желудочков. Режим синхронизированной дефибрилляции для кардиоверсии при фибрилляции предсердий.



АНД

В режиме АНД дефибриллятор/монитор производит автоматический анализ ритма и определяет необходимость подачи разряда. Голосовые и текстовые подсказки руководят действиями оператора на протяжении всей процедуры. Также имеется возможность 180-минутной записи голоса для последующего анализа и изучения.



Неинвазивная кардиостимуляция

В устройстве BeneHeart имеется режим кардиостимуляции по запросу и режим постоянной неинвазивной кардиостимуляции с настраиваемыми частотой и выходной мощностью, функциональная клавиша «4:1» позволяет временно снизить частоту подачи импульсов кардиостимуляции до 1/4 от заданного значения и наблюдать основной ритм пациента, что помогает избежать опасности внезапного снижения ЧСС.

1 Высококонтрастный дисплей




2 Просмотр 120 с записи



3 Мониторинг



4 Основной экран настройки

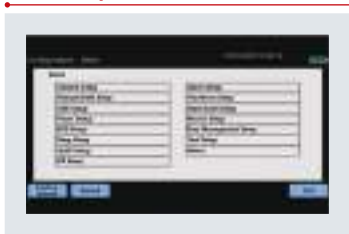

5 Хранение данных



6 Программа управления данными



1 Высококонтрастный дисплей

Высококонтрастный режим дисплея обеспечивает удобство просмотра данных в условиях интенсивного освещения, особенно вне помещения.

2 Просмотр 120 с записи

Режим стоп-кадра с возможностью просмотра последних 120 с записи кривой ЭКГ обеспечивает широкие возможности обнаружения патологических сигналов.

Этот специальный инструмент помогает врачам оценить потенциальный риск возникновения сердечной аритмии.

3 Мониторинг

На большой дисплей высокого разрешения с 3 каналами для кривых непрерывно выводятся данные мониторинга ЭКГ и SPO₂.

4 Основной экран настройки

Централизованные настройки дефибрилляции и мониторинга в одном окне меню позволяют настроить все параметры за один раз.

5 Хранение данных

Большое хранилище данных, включающее показатели 100 пациентов, 1000 записей эпизодов для каждого пациента и 24 часа непрерывной записи кривой ЭКГ предоставляет медицинскому персоналу необходимые данные для анализа, учета клинической статистики и ведения необходимой документации.

6 Программа управления данными

Пользователь может просматривать данные пациентов, записи эпизодов и кривые ЭКГ, редактировать данные пациентов и распечатывать отчеты на ПК с помощью программы управления данными.

VeneHeart D3

Дефибриллятор/монитор

Удобная конструкция для повышения эффективности реанимации



- Наглядные данные и кнопки разных цветов упрощают процедуру ручной дефибрилляции, сводя ее к 3 этапам.
- Большой световой индикатор тревоги быстро привлекает внимание к пациенту, что позволяет немедленно принять необходимые меры.
- Элементы управления разрядными электродами позволяют просто и быстро подать разряд с помощью удобных кнопок выбора уровня энергии, зарядки и подачи разряда.
- Поворотная ручка очень удобна при вводе данных и навигации по экрану посредством простого вращения и нажатия.
- Кнопка выбора отведений обеспечивает быстрый поиск кривой ЭКГ нужного качества.
- Многоканальный источник питания — переменный/постоянный ток/12 вольт постоянного тока — позволяет использовать устройство в любых условиях.



Электроды для дефибрилляции
Внешние электроды для дефибрилляции быстро трансформируются из взрослых в детские.



Электроды
Многофункциональные электроды для взрослых и детей отвечают потребностям разных отделений.



Чехол для принадлежностей
Дополнительный чехол для принадлежностей крепится на задней панели дефибриллятора D3 и при необходимости может быть снят.



Держатель для геля
Держатель для геля предназначен для фиксации тюбика с гелем и для удобства крепится на задней панели дефибриллятора D3.



Ручка для переноски
Надежная ручка для переноски предназначена для удобства транспортировки.



Зарядное устройство аккумулятора
Зарядное устройство с двумя отделениями пригодно для аккумуляторов как дефибриллятора VeneHeart D6, так и D3.



Крюк для поручней кровати
Прочный крюк для поручней кровати очень удобен для надежного крепления устройства во время транспортировки пациента.

mindray

ДИСТРИБЬЮТОР: